
REF
LD

Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór produktu marki TYL.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

CE

LASKA DO CHODZENIA - DREWNIANA


1. Zastosowanie: Laska przeznaczona jest do indywidualnej stabilności osoby doświadczającej trudności podczas poruszania się. Służy do asekuracji pacjenta przy wstawaniu i chodzeniu podczas jego rehabilitacji. Odciąża pracę mięśni, umożliwiając uniknięcie lub zredukowanie bólu powstałego na skutek ruchu.

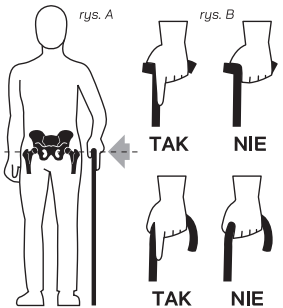

2. Użytkowanie: Odpowiednie ustalenie wysokości laski uznaje się za prawidłowe, jeżeli w czasie użytkowania pracuje ona pionowo w pozycji równoległej do osi ciała. Prawidłowo rękojeść laski powinna być na równi ze stawem biodrowym, a łokieć wygięty pod maksymalnym kątem 30 stopni *(rys. A)*. Rękojeść laski należy trzymać zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku *(rys. B)*. Prosimy regularnie sprawdzać nasadkę gumową służącą do bezpiecznego i cichego użytkowania, gdyż w efekcie eksploatacji ulega ona starciu - wówczas należy niezwłocznie wymienić ją na nową. W okresie zimowym zaleca się stosowanie specjalnej nasadki antypoślizgowej z kolcami. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

3. Rozmiary: W celu dopasowania laski do wzrostu użytkownika należy zdjąć z dolnej części laski nasadkę gumową i skrócić trzon (kij drewniany) do wymiaru odpowiadającemu wzrostowi użytkownika. Zalecamy konsultację z lekarzem.

4. Model: Laski ze względu na rodzaj uchwytu dzielą się na okrągłe (np. giętą), profilowane (np. derby, fritz), dedykowane do obu dłoni, z gałką, anatomiczne pasujące wyłącznie do lewej lub prawej dłoni oraz pozostałe. Identyfikacja modelu wskazana jest symbolem widocznym na etykiecie przyklejonej do produktu. **Rodzaje uchwytów:**

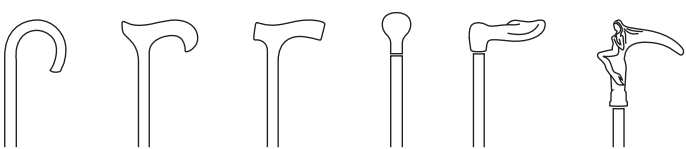

5. Obciążenie: Maksymalne obciążenie dla laski drewnianej wynosi 100kg.

6. Konserwacja: Nie używać ostrych środków chemicznych, dezynfekować wilgotną szmatką, a następnie wypolerować suchą. Chronić rękojeść przed zatłuszczeniem.

7. Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu zamkniętym, wolnym od wilgoci, oparów chemicznych oraz od źródła ognia.


8. Skład surowcowy: Wyselekcjonowane drewno bukowe, guma, lakier (atest PZH).

9. Gwarancja: Obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, po okazaniu dowodu zakupu. Gwarancji nie podlega zużycie gumowych nasadek wynikające z eksploatacji.


10. Zalecenia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. W chwili pojawienia się jakichkolwiek podejrzeń, co do stanu technicznego laski lub stwierdzenia pęknięcia lub poluzowania się uchwytu, zalecamy przerwać użytkowanie i poinformować o tym sprzedawcę. W trosce o środowisko prosimy wyrzucić opakowanie foliowe do właściwego pojemnika na śmieci, a zużyty produkt oddać - o ile to możliwe - do recyklingu.

11. Wyposażenie dodatkowe (do nabycia osobno):
- *(rys. 11.1)* nasadka przeciwpoślizgowa gumowa (różne średnice),
- *(rys. 11.2)* nasadka przeciwpoślizgowa z kolcami (idealna w warunkach zimowych, zwłaszcza do powierzchni oblodzonych),
- *(rys. 11.3)* opaska do laski na nadgarstek, tzw. "smycz". Zapobiega upuszczeniu laski, ułatwia jej użytkowanie i zabezpiecza przed zgubieniem.

rys. 11.1

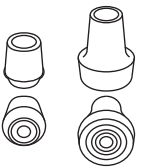

rys. 11.2

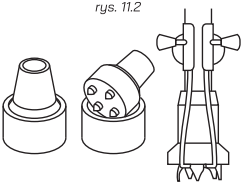

rys. 11.3



12.Termin ważności: Oczekiwana trwałość użytkowa artykułu w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem oraz przestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i pielęgnacji wynosi do 3 lat. Po przekroczeniu tego okresu, jeśli artykuł znajduje się w dobrym stanie i zapewnia bezpieczeństwo, może być używany dalej.

13.Pochodzenie: Wyprodukowano w POLSCE.







Wyrób medyczny klasy I

©

Producent zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek zmian w instrukcji. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące wykonania lub użytkowania naszych produktów, prosimy o kontakt z naszą firmą. Chętnie służymy pomocą.



Niniejsza instrukcja odnosi się do modeli lasek drewnianych o symbolach LD w zakresie kodów od 01 do 99.

Laski tworzone z pasją

Infolinia Konsumencka **730 101 101**

Więcej informacji o produktach znajdziesz na **www.tyl.pl**

Data aktualizacji instrukcji: 12-2021 Waga NETTO ∈ 280g COPYRIGHT © TYLMAX 2021

PRODUCENT: TYLMAX - ul. Twarda 45, 42-202 Częstochowa
34 307 21 21 500 238 037 tyl@tyl.pl www.tyl.pl